



ИН-500. Автоматическое титрование антител

BIO-RAD

ИН-500 – титрование антител

Экономьте время
и устраняйте ошибки,
возникающие вручную





- Bio-Rad выводит **автоматическое титрование** антител на выдающийся уровень, предлагая вам новейшие роботизированные процедуры в этой области.
- **Экономьте время**, выполняя автоматическое титрование простым нажатием кнопки с помощью прибора ИН-500, оснащенного **ID-решением для титрования**, специально разработанным для ID-карт *.
- **Устраняйте потенциальные ошибки** ручных методов, так как ИН-500 автоматически выполняет **двукратные серийные разведения**.
- В соответствии с вашими потребностями ИН-500 выполняет разведения от 1 : 1 до 1 : 32, от 1 : 1 до 1 : 2048 и от 1 : 64 до 1 : 2048.
- Гибкость процедуры титрования позволяет вам использовать ID-карты **ЛИСС Кумбс, Кумбс анти-IgG или NaCl** в зависимости от вашей практики.




* ID-решение для титрования может отлично использоваться для ручного метода и интегрировано с IH-Com.

Наслаждайтесь IN-500
с комплексным решением
для автоматического титрования.

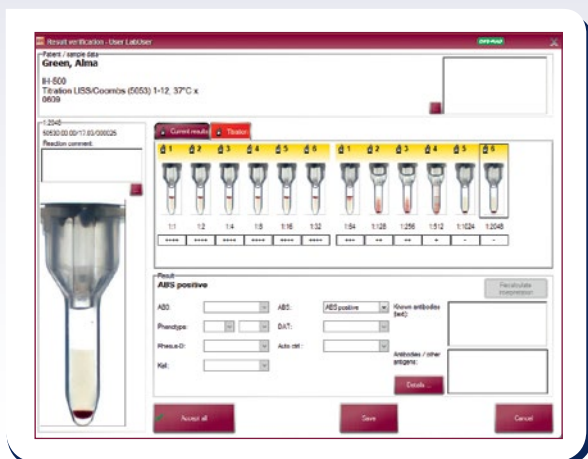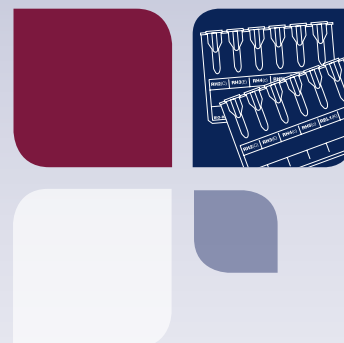

Полная интеграция в вашу лабораторию

- Процедура титрования в IN-500, автоматически адаптированная к вашей лабораторной практике, позволяет использовать ID-эритроциты Bio-Rad и ваши индивидуализированные эритроциты.
- Полностью интегрированный с IN-Com, результат титрования добавляется к общему профилю пациента, что позволяет вам обеспечить **более качественное лечение** и **более короткие сроки** в высоконадежной системе.

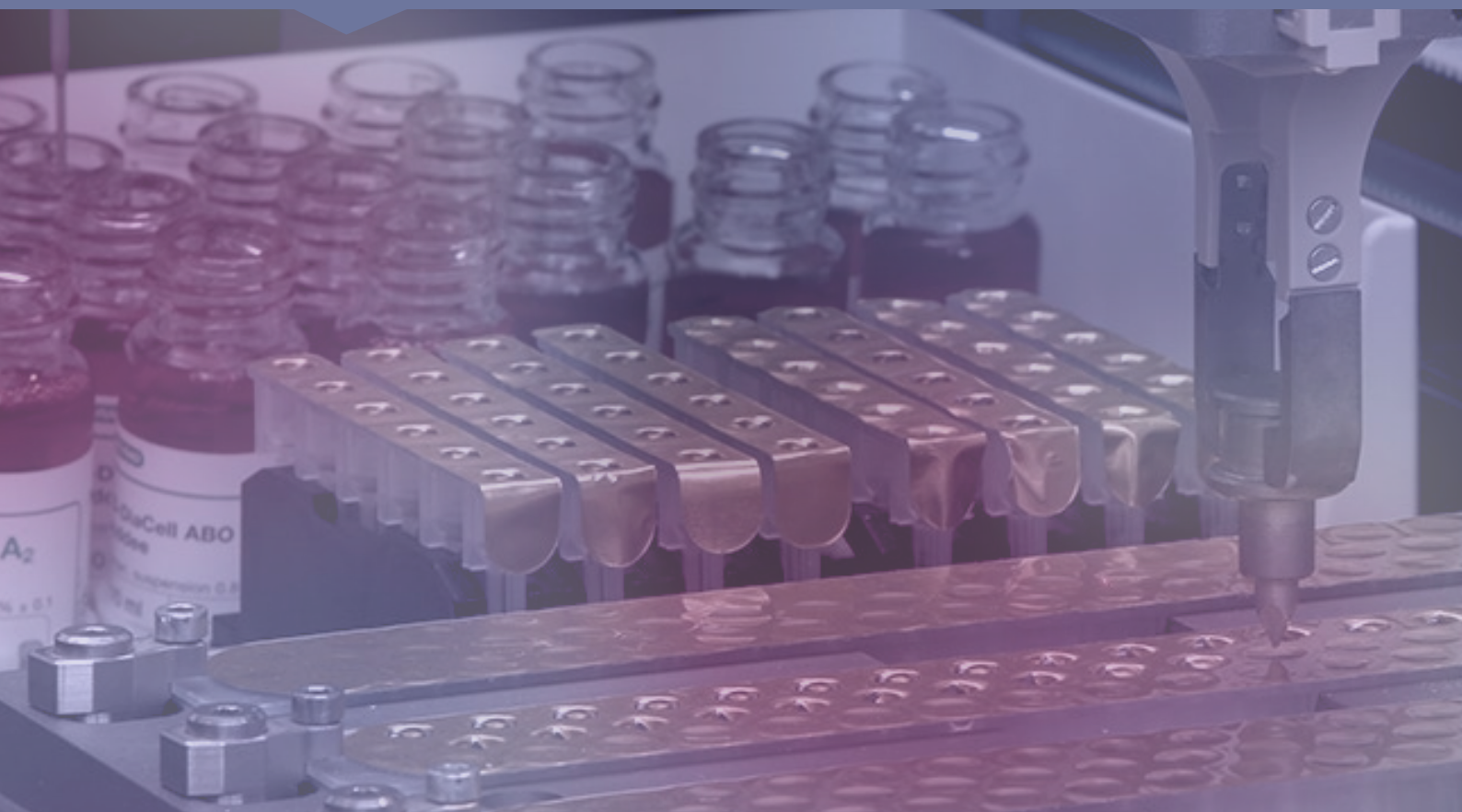

Основные характеристики

- **Автоматическое титрование антител с двукратными разведениями:**
 - от 1 : 1 до 1 : 32
 - с 1 : 64 до 1 : 2048
 - от 1 : 1 до 1 : 2048
- **Используйте любые эритроциты ID-Cell для титрования на IH-500 в соответствии с заключением об идентификации антител.**
- **Используйте нужную ID-карту:**
 - ЛИСС/ Кумбс (ид. № 50531)
 - Анти-IgG Кумбс (ид. № 50540)
 - NaCl, ферментный тест и холодные агглютинины (ид. № 50520)
- **ID-раствор для титрования: буфер для титрования, предназначенный для работы с ID-системой.**
- **Полностью интегрировано с IH-Com**

Информация для заказа

Каталожный номер	Описание
001500	IH-500 , полностью автоматизированный анализатор для ID-карт
009000	IH-Com , полная версия, ПО для управления данными
009360	ID-раствор для титрования (ид. № 05780) , 10 x 10 мл
009390	ID-штатив для титрования (ид. № 05770) , 10 штативов по 60 лунок

См www.bio-rad.com/immunohematology
для дополнительной информации



BIO-RAD is a trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
IH-500 and IH-Com are trademarks of Bio-Rad Europe, GmbH in certain jurisdictions.

BIO-RAD

**Bio-Rad
Laboratories**

*Clinical
Diagnostics Group*

Website www.bio-rad.com/diagnostics **Australia** +61(2)9914-2800 **Austria** +43-1-877-8901 **Belgium** +32(3)710-53-00 **Brazil** +55(31)3689-6600
Canada +1 514 334-4372 **China** +86-21-61698500 **Czech Republic** +420-241-430-532 **Denmark** +45-4452-1000 **Finland** +358-9-804-22-00
France +33 1 47 95 60 00 **Germany** +49(0)89-318-840 **Greece** +30-210-7774396 **Hong Kong** +852-2789-3300 **Hungary** +36-1-459-6100
India +1-800-180-1224 **Israel** +972-3-9636050 **Italy** +39-02-216091 **Japan** +81-3-6361-7070 **Korea** +82-2-3473-4460 **Mexico** +52(55)5488-7670
The Netherlands +31-318-540666 **New Zealand** +64-9-415-2280 **Norway** +47-23-38-41-30 **Poland** +48-22-3319999 **Portugal** +351-21-472-7700
Russia +7-495-721-14-04 **Singapore** +65-6415-3170 **South Africa** +27-11-442-85-08 **Spain** +34-91-590-5200 **Sweden** +46-8-555-127-00
Switzerland +41 26 674 55 05/06 **Taiwan** +886-2-2578-7189 **Thailand** +662-651-8311 **United Kingdom** +44(0)20-8328-2000